

Pactosafe® 4.0

– seal the risk



Luchtdicht verpakken van
gevaarlijk afval voor een
veiligere werkomgeving



- Hermetische zakken
- Tot 400 zakken per cassette
- Extra grote opening van zak (26 cm)
- Verbruik van cassette verminderd met 40 %
- Optioneel op batterijen

Voor een betere werkomgeving



De cytostatische medicijnen die vandaag gebruikt worden om kanker te behandelen, redden levens maar houden ook gezondheidsrisico's in voor het personeel dat het afval moet verwerken. Dit geldt ook voor het hanteren van antibiotica en antivirale middelen.

Uit verschillende onderzoeken^{1,2)} blijkt dat zelfs de flesjes die het medicijn bevatten bij levering vervuild zijn, met inbegrip van de verwerkte stoffen in gesloten systemen.

In kleuterscholen en rusthuizen is het volume van luiers en bescherming tegen incontinentie een probleem voor de werkomgeving. Een gesloten afvalbeheersysteem is dus van essentieel belang om de verspreiding van geuren en gevaarlijke aerosols te voorkomen.

Pactosafe garandeert een optimale veiligheid door het afval in luchtdichte zakken te verpakken. Dit systeem voldoet aan en overtreft zelfs de nationale en internationale richtlijnen voor het beheer van de gehele afvalketen.

EEN VEILIGERE WERKOMGEVING

- Luchtdichte afsluiting om de verspreiding van geuren, verontreinigingen en gevaarlijke aerosols te voorkomen.
- Tijdelijke opslag in alle veiligheid van besmettelijk en cytotoxisch afval gedurende 7 dagen⁴⁾.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Tot 400 zakken per cassette (40 meter).
- Afsluiten gebeurt met behulp van een pedaal om besmetting te voorkomen.
- Eenvoudig schoon te maken, dankzij het werkblad in roestvrij staal en afgeronde hoeken.

MOBIEL

- Optioneel op batterijen.

ZUINIG EN MILIEUVRIENDELIJK

- Snelle hantering.
- De lengte van de zak kan worden ingesteld en het is mogelijk om elke zak te verlengen, voor een maximale benutting van de cassette.
- Verbruikt 40% minder materiaal dan de vorige modellen.
- Ecologische PE-folie.

ERGONOMISCH

- Kader in hoogte verstelbaar.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Apotheken – de voorbereiding van cytostatica, antivirale middelen en antibiotica
- Oncologie – CMR3-behandeling³⁾
- Dialyseklinieken en bloeddonatiecentra
- Klinieken voor besmettelijke ziektes
- Rusthuizen en kleuterscholen – hanteren van bescherming tegen incontinentie en luiers
- Laboratoria – microbiologie, bacteriologie, genetische manipulatie, pathologie

1) Surface contamination of chemotherapy drug vials and evaluation of new vial-cleaning techniques: Results of three studies, Connor et al, 2004

2) Surface Contamination of Cyclophosphamide Packaging and Surface Contamination with Antineoplastic Drugs in a Hospital Pharmacy in Sweden, Hedmer et al, 2005.

3) CMR – Cancerogenic Mutagenic and Reproduction inhibiting

4) Permeation tested in accordance with EN ISO 6529 "Protective clothing – Protection against chemicals".

Toepassingsgebieden:

VOORBEREIDING

Wanneer de bereiding van de geneesmiddelen een gevaar voor de gezondheid van het personeel vormt, wordt het afval op een efficiënte wijze gescheiden in plastic zakken die hermetisch zijn verzegeld.

APOTHEKEN

Pactosafe is een aanvulling op de overdrachtsystemen voor medicijnen, veiligheidskasten, isolatoren en witte kamers. Pactosafe elimineert het risico op lekkage van cytotoxisch afval en antibioticum voor alle voorbereidingssystemen.

BEHANDELING

Pactosafe kan werken op batterijen, is mobiel en kan in de buurt van de patiënt worden gebruikt.


REINIGING

Dankzij Pactosafe wordt de bescherming tegen incontinentie veilig en reukloos opgeborgen; een belangrijke factor gezien het feit dat er tot zeven dagen na de behandeling nog cytostatica aanwezig kunnen zijn in de urine.



Een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem

- a. Cassette met polyethyleen folie
- b. De nieuwe folie gaat door de trechter
- c. De folie wordt gelast om een zak te vormen
- d. De folie en het afval worden met behulp van het pedaal verwijderd
- e. Het afval wordt verzameld in een container voor gevaarlijk afval

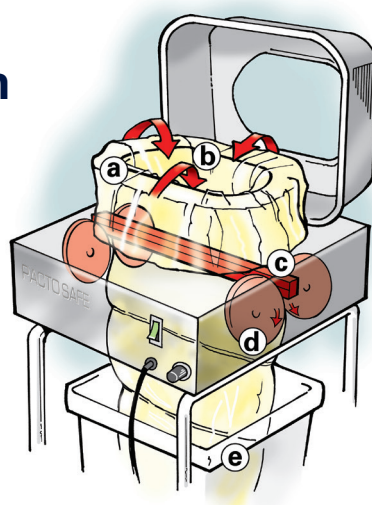

 **Pactosafe® 4.0**
– seal the risk

Pactosafe® 4.0 — seal the risk

PACTOSAFE 4.0 WIDE

Technische gegevens

Model	PACTOSAFE 4.0 WIDE
Fabrikant.....	PAXXO
Productie	EN ISO 9001, EN ISO 14001
Type.....	EN 61010-1
Specificatie	TÜV GS, MET US/C
Markering	CE, TÜV GS, MET US/C
IP-klasse	IP 20
Classificatie	Klasse III SELV (zeer lage veiligheidsspanning)
Garantie, eenheid	2 jaar
Garantie, batterij	1 jaar

Elektrische gegevens

Netspanning.....	100/110/230 VAC → 12 VDC
Vermogensfrequentie.....	50 Hz 50/60 Hz
Stroomverbruik.....	0,7 A
Elektriciteitsverbruik.....	130 W
Stroomverbruik, standby-modus	1 W
Aansluiting.....	EU-stekker

Mechanische gegevens

Breedte.....	460 mm
Diepte.....	545 mm
Opening.....	143x260 mm
Gewicht	32 kg
Hoogte.....	915-1285 mm
Hoogte van de container	445-810 mm

Artikelnr.

Pactosafe 4.0	540WS
Pactosafe 4.0+batterij	540WM
Cassette 4x40 meter	10880
Zakken support	5459

www.pactosafe.com

EUMEDICA
Pharmaceuticals

Eumedica, dat zijn ook logistieke diensten op maat voor farmaceutische bedrijven. Wij zijn gespecialiseerd in:

- het beheer en de distributie van klinische onderzoeken;
- logistieke oplossingen op verzoek van medische bedrijven die maatwerk vereisen in de distributie van farmaceutische producten;
- diensten met toegevoegde waarde, zoals re-labeling; herverpakking; voorbereiding van display voor kant en klare oplossingen.



Chemin de Nauwelette 1, 7170 Manage, Belgium
info@eumedica.com • www.eumedica.com

